

החופש לנשום. בכל מקום.

מחולל חמצן נייד

עד 7 שעות

1,2 ק"ג + 0.78 ק"ג סלולה

SM 7



החיים לא נעצרים. גם אספקת החמצן שלכם לא צריכה.

הגיע הזמן להפסיק לתכנן את היום סביב מגבלות החמצן,
ולהתחיל לחיות אותו בתנועה מלאה.



הכירו את ה- SM 7 . ניידות, ביצועים ושקט נפשי בעיצוב אחד.




קל משקל

1.98 ק"ג בלבד לחופש תנועה מוחלט.



ביצועים גבוהים


ריכוז חמצן עד 96% בכל 6 דרגות העוצמה.

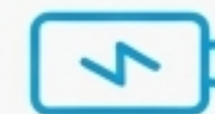

עצמאות אנרגטית

סוללה עוצמתית לשימוש של עד 7 שעות דרגה 1

עיצוב שנועד לזוז איתכם.

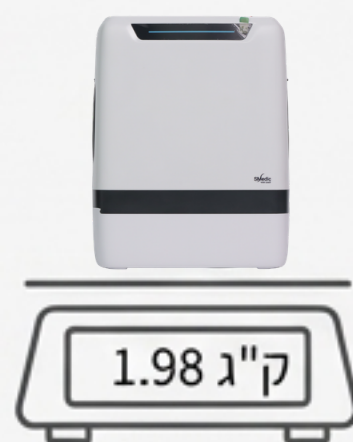

- **משקל נוצה:** 1.98 ק"ג בלבד (כולל סוללה), לנשיאה ללא מאמץ.
- **קומפקטי ודיסקרטי:** ממדים קטנים (19.9x18.3x8.6 ס"מ) המאפשרים ניידות וחופש פעולה.
- **תיק נשיאה ייעודי:** כלול בערכה, מעוצב לנוחות והגנה מרבית על המכשיר. המכשיר.



טכנולוגיית Pulse Flow: חמצן חכם, בדיוק כשצריך.

המערכת מזהה את קצב הנשימה ומספקת חמצן בדיוק במקצב שלך. התוצאה: חווית שימוש טבעית וניצול יעיל של חיי הסוללה.

7 שעות
6 שעות
5,5 שעות
4,5 שעות
3,5 שעות
2-2.5 שעות

עוצמת זרימה	
דרגה	זרימה כוללת (ml/min)
1	200 ml/min
2	400 ml/min
3	600 ml/min
4	800 ml/min
5	1000 ml/min
6	1200 ml/min

ריכוז חמצן של 90%-96% נשמר בכל דרגות העוצמה.

אנרגיה שמלווה אותך. מהבית, לרכב, ולהרפתקה הבאה.



זמן פעולה ארוך: 7 שעות דרגה 1
פעולה רציפה, בהתאם לעוצמת
השימוש.



טעינה מהירה: סוללה מלאה בפחות
מ-2.5 שעות.



גמישות טעינה מלאה: כולל מטען ביתי
(AC) ומטען לרכב (DC) ללא תוספת
תשלום.



שליטה מלאה, בפשטות ובבהירות.





מסך תצוגה גדול וברור מציג את כל הנתונים החיוניים: דרגת עוצמה, זמן שימוש ומצב סוללה.
לחצנים אינטואיטיביים מאפשרים תפעול קל ומהיר.

בטיחות וביטחון בכל נשימה.



- **מערכת התראות חכמה:** התראות קוליות וויזואליות למצבים קריטיים. התראות עיקריות כוללות:

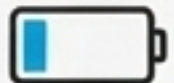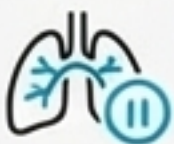- ריכוז חמצן נמוך (מתחת ל-80%) ↓%
- סוללה חלשה 
- הפסקת נשימה (מעל 15 שניות) 
- תקלות מערכת (מאוורר, מדחס) 

כל מה שצריך כדי לצאת לדרך, מהרגע הראשון.

מחולל חמצן



סוללת ליתיום



מטען ביתי AC



מטען לרכב DC

2 צינוריות חמצן
(משקפיים)



2 סטים של פילטרים
להחלפה

מדריך למשתמש

תיק נשיאה



מפרט טכני מלא

דגם	SM 7
ריכוז חמצן	90%-96% (בכל הדרגות)
קצב זרימה (Pulse)	1-6 דרגות
משקל (עם סוללה)	1,98 ק"ג
מידות	8.6x18.3x19.9 \ 8.6x18.3x22.2 ס"מ
זמן פעולת סוללה	7 שעות דרגה 1
זמן טעינת סוללה	עד 2.5 שעות
רמת רעש	≤60dB(A)
סביבת עבודה (טמפ')	5°C - 40°C
גובה עבודה מרבי	0 - 4000 מטר

S-Medic: השותפים שלכם לבריאות ואיכות חיים.



אנו ב-S-Medic מחייבים לספק את הפתרונות הרפואיים המתקדמים
המתקדמים והאמינים ביותר.

www.s-medic.co.il

+972-3-9099001